



CASADATM
healthcare

relaxmyway

QUATTROMED V



Saugumo instrukcijos



Prieš pradėdami naudoti masažuokliu, perskaitykite naudojimosi instrukciją. Išsaugokite šią instrukciją.

- Masažuoklis atitinka visus techninius ir saugos reikalavimus.
- Esant reikalui, masažuoklio remontas gali būti atliktas tik įgaliotų specialistų.
- Netinkamo naudojimo ar neteisėto remonto atvejais, treniruoklis netenka gamintojo suteiktos garantijos.
- Niekada nelieskite maitinimo laido šlapiomis rankomis.
- Venkite masažuoklio kontakto su drėgme, aukšta temperatūra ir tiesioginiais saulės spinduliais.
- Norėdami išvengti trumpo sujungimo pavojaus, jei nesinaudojate masažuokliu, ištraukite maitinimo laidą iš elektros tinklo.
- Nesinaudokite masažuokliu, jei pažeistas kištukas, maitinimo laidas ar kitos dalys.
- Jei sugadintas kištukas ar maitinimo laidas, juos turi pakeisti gamintojo įgalioti atstovai.
- Jei yra gedimas, nedelsiant išjunkite masažuoklį iš elektros tinklo.
- Netinkamas masažuoklio naudojimas užtraukia Jūsų atsakomybę už patirtą žalą.
- Nesinaudokite masažuokliu ilgiau nei 30 minučių, kad išvengtumėte per didelio raumenų bei nervų suspaudimo.
- Nuo masažo reikia susilaikyti, jei: esate nėščia, jei masažiname plote yra sužeidimų, uždegimų, trombotinių susirgimų, patinimų, išbėrimų, jei sergate vėžiu. Prieš pradėdami masažą, pasikonsultuokite su savo gydytoju.
- Nesinaudokite masažuokliu vairuodami automobilį.
- Jei turite širdies stimuliatorių, būtinai pasikonsultuokite su savo gydytoju.
- Masažuoklio pakuotė ir jos dalys negali būti naudojamos kaip žaislai vaikams.
- Šis masažuoklis nėra profesionalus, jis skirtas tik asmeniniam naudojimui. Masažuoklis neskirtas medicinai.
- Nesinaudokite masažuokliu lauke, jam veikiant neuždenkite jo antklode ar pagalve.
- Įsitikinkite, kad drabužiai, papuošalai, plaukai yra saugiai atskirti nuo judančių masažuoklio detalių.

KOMPLEKTACIJA

- 24 voltų adapteris
- Naudojimosi instrukcija
- Sėdimoji dalis
- Atlošas
- Valdymo pultas
- Allen raktas



SURINKIMAS / PRADŽIA


1. Atidarykite dėžę, išimkite maitinimo laidą ir adapterį.
2. Atitraukite juodą įpakavimo maišą, atsargiai iš jo ištraukite masažuoklį.
3. Nuimkite apsauginę plėvelę.
4. Masažuoklio uždangalas gali būti atskirtas nuo atlošo užtrauktuku. Prieš pradėdami naudotis masažuokliu, išimkite tarp jų esantį apsauginį kartoną. Ten rasite ir paroloninę pagalvėlę. Ji skirta norintiems švelnesnio masažo.
5. Atlošas ir sėdimoji dalis būna atskirti vienas nuo kito. Ištraukite valdymo pultą iš kišenės sėdimojoje dalyje, sujunkite atlošą ir sėdimąją dalį užtrauktuku. (1 pav.)
6. Tinkamai sujunkite laidus. (2 pav.)

APSAUGINIO VARŽTO IŠĖMIMAS


Naudodamiesi Allen raktu, išsukite atloše esantį apsauginį varžtą. Jis buvo reikalingas masažinio mechanizmo apsaugai transportavimo metu.

7. Padėkite masažuoklį ant kėdės, sofas ar fotelio. Masažuoklio atlošo kitoje pusėje yra tvirtinimo juostelė, kurios pagalba masažuoklį pritvirtinsite prie daugelio kėdžių.
8. Prijunkite maitinimo laidą (3 pav.). Įjunkite maitinimo laidą į elektros tinklą ir įjunkite masažuoklį naudodami raudoną „ON/OFF“ mygtuką.


DĖMESIO! Šis varžtas daugiau nebebus reikalingas.

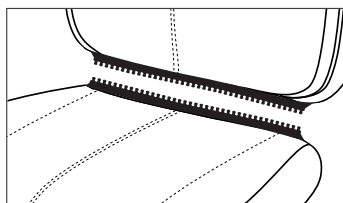

(1 pav)

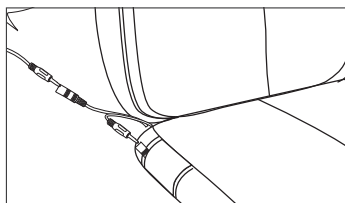

(2 pav)

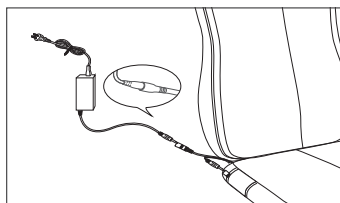

(3 pav)

TRIKČIŲ DIAGNOSTIKA

PROBLEMA

Masažuoklis yra sujungtas, bet neveikia nei jis, nei valdymo pultas.

- Masažuoklis yra sujungtas. Veikia vibracija ir jos negalima išjungti. Valdymo pultas ir masažuoklis neveikia.

- Masažuoklis yra sujungtas. Neveikia vibracija.


SPRENDIMAS

- Patikrinkite visas laidų jungtis. Patikrinkite, ar gerai sujungtas maitinimo laidas.


- Dėl ilgo veikimo masažuoklis gali būti perkaitęs. Ištraukite maitinimo laidą iš elektros tinklo ir leiskite masažuokliui visiškai atvėsti.

- Patikrinkite visas laidų jungtis. Patikrinkite, ar gerai sujungtas maitinimo laidas.


YPATYBĖS

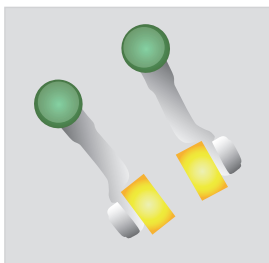

Masažuoklis masažuoja 4 masažinėmis galvutėmis ir turi Shiatsu, bilsojimo, spaudymo bei rutulinio masažo funkcijas. Judančios silikoninės galvutės, kaip ir fiksuotos galvutės, suteikia stuburo tarpslanksteliniam diskams atpalaiduojantį ir mineralais praturtintą masažą. Galvutės su sertifikuotu nefritu masažuoja raminančiai ir maloniai šildančiai.

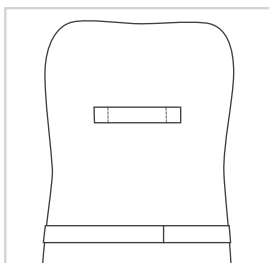

Kilpa, esanti galinėje atlošo pusėje, yra skirta pastatyti masažuoklį į norimą padėtį, kai jis yra ant kėdės ar fotelio. Kilpa nėra skirta nešimui. Norint nešti masažuoklį, jį reikia laikyti abejomis rankomis. Žemiau esančios Velcro juostelės yra skirtos masažuoklio tvirtinimui prie kėdės atlošo bei masažuoklio stabilizavimui masažo metu.

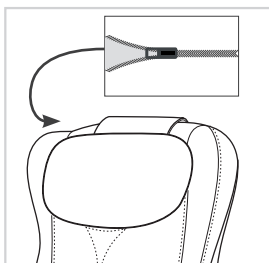

Norint intensyvesnio masažo ar prireikus išvalyti papildomą atlošo odinį paklotą, jį galima nuimti atitraukus viršuje esantį užtrauktuką bei atkabinius Velcro juosteles.



Norėdami vibraciniu masažu pamasažuoti kojas, atsekite sėdimąją dalį nuo atlošo ir patogiai uždėkite ant jos pėdas.

YPATYBĖS



RUTULINIS MASAŽAS

Rutulinis masažas atpalaiduoja ir ramina. Puikiai tinka pavargusiems raumenims bei skatina jų regeneraciją.



MASAŽAS SPAUDANT

Oda ir raumenys yra arba tvirtai suspaudžiami ir masažuojami tarp nykščio ir rodomojo piršto, arba abejomis rankomis. Ši masažo technika naudojama įtampai mažinti.



VIBRACINIS MASAŽAS

Vibracinis masažas stimuliuoja kraujo apytaką, apšildo ir atpalaiduoja raumenis.



NEFRITO ŠILUMA

Nefritas yra natūralus šilumos laidininkas. Aukštos kokybės nefrito mineralai, tiksliai integruoti į masažines galvutes, suteikia malonų šilumos ir atsipalaidavimo pojūtį.



AUTOMATINĖS MASAŽO PROGRAMOS

Automatinės programos su plačiu masažo rūšių pasirinkimu skirtos visam kūnui. Galima šildymo funkcija.



TAŠKINIS MASAŽAS

Galimybė sustabdyti masažines galvutes konkrečiai pasirinktos vietos masažui.



SHIATSU

SHIATSU (spaudant pirštais), yra masažo forma, atsiradusi Japonijoje. Masažo technika susideda iš švelnių, ritmiškų ir toli siekiančių judesių bei pasukimų. Ši masažo rūšis stimuliuoja atskiras kūno vietas bei mobilizuoja raumenis.



MASAŽO PLOTIS

Atstumas tarp masažinių galvutėlių gali būti reguliuojamas (siauras, vidutinis, platus).



MASAŽO AUKŠTIS

Reguliuojamas masažo aukštis.



3D MASAŽAS

Naujas masažo būdas, kai masažinės galvutės juda ne tik aukštyn/žemyn, bet ir pirmyn/atgal.

VALDYMO PULTAS

- 1| **POWER**
Įjungimo/išjungimo mygtukas.
- 2| **AUKŠTIS**
Kai pasirinkta funkcija [Area]/[Auto], paspauskite [Height] norėdami pasirinkti žemiausią aukštį. Norėdami išeiti iš šios funkcijos, paspauskite [Height] vėl.
- 3| **AUTOMATINĖS PROGRAMOS**
Masažuoklis turi 3 automatines programas. Paspaudus [Program], masažuoklis veiks cikliškaipersijungiant režimams 1 (Mėlynas)/ 2 (Žalias)/ 3 (Raudonas).
- 4| **ŠILDYMAS**
Šildymo funkcija gali veikti su [Tapping]/[Shiatsu]/[Auto]/[Area] programomis. Paspauskite [Heating] mygtuką, norėdami įjungti ar išjungti šildymo funkciją.
- 5| **VIBRACIJA**
[Vibration] gali būti įjungiama bet kada su [Tapping] / [Shiatsu] / [Auto] / [Area] programomis. Paspauskite [Vibration] mygtuką, norėdami įjungti vibracijos funkciją.
- 6| **SHIATSU**
Paspauskite [Shiatsu] mygtuką pradėti masažą. Jis prasidės vidutiniu greičiu. Jei masažuoklis veikia automatiniam režime, jis savaime persijungs į SHIATSU. Paspauskite [Shiatsu] dar kartą, norėdami išeiti iš šios masažo funkcijos.
- 7| **BILSNOJIMAS**
Paspauskite [Tapping] mygtuką pradėti masažą. Jis prasidės vidutiniu stiprumu. Jei masažuoklis veikia automatiniam režime, jis savaime persijungs į bilсноjimo masažą. Paspauskite [Tapping] dar kartą, norėdami išeiti iš šios masažo funkcijos.
- 8| **LĒTAI - GREITAI**
[Slow – Fast] funkcija veiks tik [Tapping] masažo režime. Paspauskite [Slow – Fast] mygtuką ir bilсноjimo masažas automatiškai sustiprės.
- 9| **GREITAI - LĒTAI**
[Fast – Slow] funkcija veiks tik [Tapping] masažo režime. Paspauskite [Fast – Slow] mygtuką ir bilсноjimo masažas automatiškai susilpnės.
- 10| **MASAŽO PLOTIS**
[Width] funkcija veiks tik [Tapping] masažo režime. Ji neveiks su [Shiatsu] funkcija. Paspauskite [Width] mygtuką 1 - 2 - 3 kartus ir masažinės galvutės prasiplės iš siauros į vidutinę, į plačią poziciją ir atgal. Paspaudus [Width] mygtuką 4-ą kartą, masažinių galvučių plotis keisis cikliškaip.
- 11| **GREITAI**
Bilсноjimo stiprumas yra 3 lygių: Aukštas/Vidutinis/Žemas. [Fast] mygtukas veiks tik [Tapping] režime. Paspauskite [Fast] mygtuką ir bilсноjimas sustiprės.
- 12| **LĒTAI**
Bilсноjimo stiprumas yra 3 lygių: Aukštas/Vidutinis/Žemas. [Slow] mygtukas veiks tik [Tapping] režime. Paspauskite [Slow] mygtuką ir bilсноjimas sustiprės.

VALDYMO PULTAS

13| LO
SHIATSU stiprumas yra 3 lygių: Aukštas/
Vidutinis/Žemas. Mygtukas [LO Shiatsu
Speed] veiks tik kai įjungta [Shiatsu]
funkcija. Paspauskite [LO Shiatsu Speed] ir
masažo stiprumas sumažės.

14| HI
SHIATSU stiprumas yra 3
lygių: Aukštas/ Vidutinis/Žemas. Mygtukas
[HI Shiatsu Speed] veiks tik kai įjungta
[Shiatsu] funkcija. Paspauskite [Hi Shiatsu
Speed] masažo stiprumas padidės.

15| AUKŠTYN - ŽEMYN
Kontroliniai mygtukai reguliuoja
masažinių galvučių aukštį esant taškiniam
masažui. Jų pagalba masažines galvutes
galima nuleisti žemyn arba pakelti į viršų,
laikant juos paspaudus.

16| FULLBACK
Automatinė masažo programa visai
nugarai. Raminantis masažas visai nugarai
su rutulinio masažo funkcija. Pasirinktina
gali būti [Tapping]/[Shiatsu]/ [Heating]/
[Vibration].

17| UPPER
Automatinė masažo programa viršutinei
nugaros daliai. Raminantis masažas
viršutinei nugaros daliai su rutulinio
masažo funkcija. Pasirinktina gali būti
[Tapping]/[Shiatsu]/ [Heating]/
[Vibration].

18| LOWER
Automatinė masažo programa apatinei
nugaros daliai. Raminantis masažas
apatinei nugaros daliai su rutulinio masažo
funkcija. Pasirinktina gali būti [Tapping]/
[Shiatsu]/ [Heating]/ [Vibration].




LAIKYMAS / PRIEŽIŪRA

Tinkamai prižiūredami masažuoklį prailginsite jo veikimo laiką ir išvengsite sužalojimų.

1. Laikykite masažuoklį sausoje ir švarioje vietoje.
2. Saugokite masažuoklį nuo atviros ugnies ir skysčių patekimo.
3. Valykite masažuoklį dirbtinei odai skirtomis valymo priemonėmis arba sausa šluoste.
4. Valydami masažuoklį nemerkitė jo į vandenį ar kitus skysčius.
5. Išvalius masažuoklį, visiškai jį išdžiovinkite.
6. Įsitinkinkite, kad drėgmė ar vanduo nepapuola į valdymo pultą per mygtukų tarpus.
7. Jei nesinaudojate masažuokliu, ištraukite jo maitinimo laidą iš elektros tinklo.

TECHNINIAI DUOMENYS

Atlošo išmatavimai:	75 x 45 x 20 cm
Sėdimos dalies išmatavimai:	7,5 x 45 x 42 cm
Svoris:	8,5 kg
Įtampa:	110-240V~, 50/60 Hz 24V  , 2500mA
Galingumas:	60W
Veikimo laikas:	15 minučių

Sertifikatai:



ES ATITIKTIES DEKLARACIJA

Atitinka ES standartus EMC 2014/30/EU and LVD 2014/35/EU.

GARANTIJOS PAŽYMĖJIMAS

Tinkamai naudojant, gaminiui suteikiamametų eksploataavimo garantija.

PIRKĖJAS (-A):

DATA:

SERIJOS NR:

PARDAVĖJAS:

(vardas, pavardė, parašas)

Garantija neapima:

- žalos dėl netinkamo eksploataavimo;
- žalos, padarytos naminių gyvūnų;
- žalos dėl netinkamo prijungimo prie elektros tinklo ir perteklinių tinklo įtampos svyravimų;
- susidėvinčių detalių ir lūžtančių detalių iš plastiko;
- kliento arba trečiųjų asmenų veiksmų, kuriems atlikti gamintojas nesuteikė leidimo.

Laikykites eksploataavimo instrukcijoje pateiktų nurodymų!

VILNIUJE:

UAB VAIKIS
Kaimelio g. 13 (2 aukštas)
Mob: +370-640-83271
El.paštas: vilnius@vaikis.eu

www.vaikis.eu

