



time to relax



# NECK 2 GO



## < laikas atsipalaiduoti

Nuo tada, kai įmonė buvo įkurta 2000 m., CASADA vardas tapo aukštos kokybės produktų sinonimu sveikatingumo ir kūno rengybos sektoriuje.

Šiandien CASADA įrenginiai yra prieinami visame pasaulyje. Nuolatinis tobulėjimas, nepriekaištingas dizainas ir griežtas dėmesys gyvenimo kokybei gerinti CASADA gaminiams būdingas lygiai tiek pat, kiek patikima ir aukščiausios klasės kokybė.

## Sveikiname!

Įsigydami šį masažo prietaisą įrodėte, kad rūpinatės savo sveikata.

Kad galėtumėte naudotis šio prietaiso privalumais ilgą laiką, prašome atidžiai perskaityti saugos instrukcijas ir jų laikytis.

Linkime jums sėkmės naudojantis savo Neck2Go.

## Turinys

Saugos instrukcijos .....	12
Prekės aprašymas .....	13
Techniniai duomenys .....	13
Įkrovimas .....	12
Naudojimas .....	14
Specifikacijos .....	15
Problemų sprendimas .....	16
Priežiūra .....	16
ES atitikties deklaracija .....	17
Garantijos sąlygos .....	17



# Saugos instrukcijos




Prieš pradėdami naudoti masažo prietaisą, atidžiai perskaitykite toliau pateiktas instrukcijas, kad užtikrintumėte, jog jis veiktų be problemų ir būtų optimalus. Išsaugokite šią naudojimo instrukciją tolimesniam naudojimui!

- Masažo prietaisas atitinka pripažintus techninius principus ir naujausius saugos reikalavimus.
- Šis prietaisas nereikalauja jokios priežiūros.
- Bet kokius galimus remonto darbus gali atlikti tik įgalioti specialistai. Netinkamas naudojimas ir neteisėtas remontas yra draudžiami saugumo sumetimais ir dėl to prarandama garantija.
- Niekada nelieskite maitinimo kištuko šlapiomis rankomis.
- Venkite prietaiso sąlyčio su vandeniu, aukšta temperatūra ir tiesioginiais saulės spinduliais.
- Venkite prietaiso sąlyčio su vandeniu, aukšta temperatūra ir tiesioginiais saulės spinduliais.
- Nenaudokite pažeistų laidų, kištukų ar atsilaisvinusių lizdų. Jei kištukai ar laidai yra pažeisti, juos turi pakeisti gamintojas, techninės priežiūros atstovas arba kvalifikuotas personalas.
- Gedimo atveju nedelsdami atjunkite nuo elektros tinklo. Netinkamas arba netinkamas naudojimas neatsako už žalą.
- Kad nebūtų pernelyg stimuliuojami raumenys ir nervai, rekomenduojama masažo trukmė neviršyti 30 minučių.
- Niekada nenaudokite smailių ar aštrių daiktų.
- Nėštumometu arba jei masažo zonoje yra vienas ar keli iš šių nusiskundimų: neseniai patirtos traumos, trombozės, visokie uždegimai ir patinimai, vėžys. Prieš atliekant masažą, skirtą ligoms ar negalavimams gydyti, rekomenduojama pasitarti su gydytoju.
- Nenaudokite šio prietaiso vairuodami.
- Jei esate priklausomas nuo elektrinių pagalbinių priemonių, pvz. širdies stimuliatorių, prieš atlikdami masažą būtinai pasitarkite su gydytoju.
- Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir asmenys, turintys ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų arba neturintys patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi arba yra instruktuojami, kaip saugiai naudoti prietaisą ir supranta susijusių pavojų.
- Vaikams neleidžiama žaisti su įrenginiu.
- Vaikai be priežiūros neturėtų atlikti valymo ir priežiūros.
- Asmenys, jautrūs karščiui, turi būti atsargūs naudodami įrenginį.
- Prietaisą naudokite tik su pridėdama įranga.

## Įkrovimas

1. Prijunkite maitinimo bloką prie gaminio ir prie maitinimo lizdo.
2. Įkrovimo metu užsidegs įkrovimo indikatorius lempučių ant masažo galvutės (žalia).
3. Kai akumuliatorius bus visiškai įkrautas, žalios lempučių užges.
4. Po įkrovimo ištraukite maitinimo bloką iš maitinimo lizdo ir atjunkite jį nuo gaminio.

# Prekės aprašymas

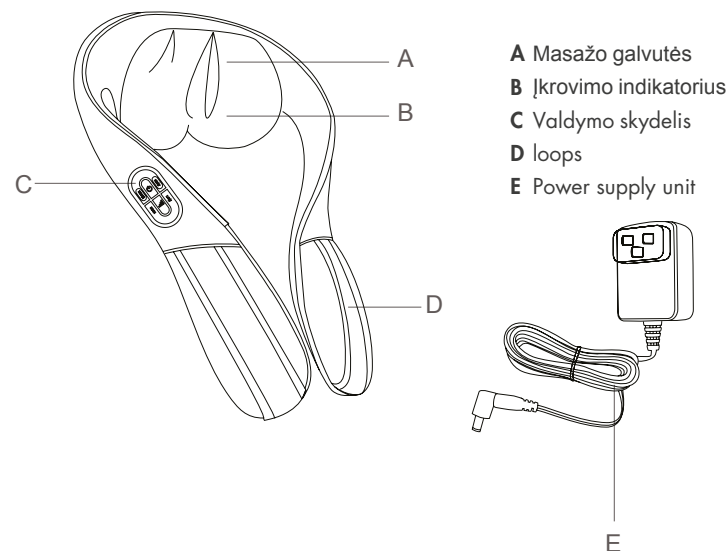

## Techniniai duomenys

Produkto išmatavimai (LxWxH) 580 x 400 x 200 mm

Svoris 2,05 kg

Maitinimas  
įvestis 100-240V ~ 50/60Hz  
išvestis DC 12.8 V, 1800 mA

Nominali galia 23 W

Automatinis veikimo laikas 10 minutes

Sertifikatai



Edited with the demo version of  
**Infix Pro PDF Editor**

To remove this notice, visit:  
[www.iceni.com/unlock.htm](http://www.iceni.com/unlock.htm)

# Kontrolės skydelis

1. Norėdami paleisti įrenginį, paspauskite ir palaikykite POWER mygtuką. Įrenginys pradės veikti 1 režimu mažu greičiu. Norėdami jį išjungti, dar kartą paspauskite POWER mygtuką.

2. MODE  mygtukas

Prietaisas įsijungs 1 režimu (žalia šviesa: masažo galvutės veikia į vidų). Paspauskite mygtuką, kad perjungtumėte į 2 režimą (raudona lemputė: masažo galvutės veikia į išorę). Dar kartą paspauskite mygtuką, kad perjungtumėte į 3 režimą (geltona lemputė: masažo galvutės veikia į vidų ir į išorę).

3. Įrenginys turi 2 greičio nustatymus. Jis automatiškai paleidžiamas mažu greičiu. Paspauskite SPEED mygtuką, kad padidintumėte masažo greitį arba vėl jį sumažinti.



Automatinė masažo programa trunka 10 minučių. Po šio laiko masažo prietaisas automatiškai išsijungs, kad neperkaistų. Po kiekvieno naudojimo ištraukite maitinimo laidą iš lizdo.

## Naudojimas

Uždėkite Neck2Go ant sprando ir leiskite kilpoms nukristi į priekį virš krūtinės. Pasiekite kilpas kairėje ir dešinėje ir padėkite masažo prietaisą ant kaklo taip, kad jūs jaustumėtes patogiai (1 pav.).

Prietaisu alternatyviai galima masažuoti šlaunis (2 pav.).



(Fig. 1)



(Fig. 2)

# Masažo būdai



**MINKYMAS.** Oda ir raumenys yra minkomi tarp nykščio ir smiliaus arba abiem rankomis. Ši masažo technika ypač naudojama siekiant sumažinti įtampą.



**ŠILDYMAS.** Giliai įsiskverbiantis ir šilumą skleidžiantis efektas, kurio metu galima puikiai atsipalaiduoti. Ši funkcija ypač naudinga esant raumenų įtampai.



**ATVIRKŠČIAI.** Atbulinės eigos funkcija keičia masažo galvutėlių kryptį.



**AKUMULIATORIUS.** Baterijomis maitinamas masažas.



**GREITIS.** Reguliuojamas masažo greitis.



**BELAIDIS.** Belaidis masažo aparatas.



**NYKŠČIO SLĖGIMAS.** Apvalios masažo galvutės, atkartoja žmogaus nykščio galiuku paspaudimus, suteikia labai subtilų masažo potyrį.



Edited with the demo version of  
**Infix Pro PDF Editor**

To remove this notice, visit:  
[www.iceni.com/unlock.htm](http://www.iceni.com/unlock.htm)

# Problemų sprendimas

Lentelėje pateikiama dažniausiai pasitaikantis problemų santrauka.

Jei negalite išspręsti problemos naudodamiesi toliau pateikta informacija, nedelsdami susisiekite su gamintoju arba /įgaliotuoju pardavėju.

Gedimas	Galima priežastis	veiksmas
Įrenginys neveikia.	Žemas akumulatoriaus lygis.	Įkraukite įrenginį.
	Įrenginys neišsijungia po automatinio veikimo 10 min.	Norėdami iš naujo pradėti masažą, paspauskite maitinimo mygtuką.
	Gali būti, kad gaminį naudojote 40 minučių ar ilgiau, todėl suveikė apsauga nuo perkaitimo.	Prieš naudodami vėl, leiskite produktui atvėsti 60 minučių.
Prietaisas buvo pernelyg apkrautas.	Sumažinkite įrenginio apkrovą ir paleiskite jį iš naujo.	
Prietaisas atrodo karštesnis nei turėtų.	Įrenginys buvo perkrautas.	Prieš naudodami vėl, leiskite produktui atvėsti.
Prietaisas skleidžia stiprų garsą.	Triukšmą sukelia mechaniniai įrenginio komponentai.	Tai normalu ir nereiškia, kad gaminys pažeistas.

## Priežiūra |

### VALYMAS

1. Gaminiai valyti nenaudokite plieno vatos, valymo priemonių ar korozinių skysčių (tokių kaip benzinas ir acetonas).
2. Ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo.
3. Nuvalykite gaminį minkšta, sausa šluoste.
4. Skysčius ir atvirą liepsną laikykite toliau nuo prietaiso.

# ES atitikties deklaracija

Atitinka Europos direktyvas EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU ir RoHs.

## Garantijos sąlygos

Mažmenininkas suteiks įstatymo nustatytą garantijos laikotarpį gaminiui, aprašytam kitoje pusėje. Garantija galioja nuo pirkimo datos. Pirkimo data turi būti patvirtinta kartu su pirkimo įrodymu. Mažmenininkas nemokamai pataisys arba pakeis gaminius, kuriuose buvo nustatytas defektas. Tai neapima susidėvėjusių dalių, tokių kaip medžiaginiai dangčiai. Reikalavimas, kad sugedęs prietaisas būtų išsiųstas su pirkimo įrodymu nepasibaigus garantiniam laikotarpiui.

Garantinis reikalavimas netaikomas, jei nustatomas gedimas, atsiradęs pvz. dėl išorinių poveikių arba dėl remonto ar modifikavimo, kurio neatliko gamintojas arba įgaliotasis pardavėjas. Pardavėjo garantija apsiriboja gaminio taisymu arba pakeitimu. Šios garantijos ribose gamintojas ar pardavėjas nepriima jokios tolesnės atsakomybės ir neatsako už žalą, atsiradusią dėl naudojimo instrukcijų nesilaikymo ir (arba) netinkamo gaminio naudojimo.

Jeigu gamintojui apžiūrėjus prekę nustatoma, kad garantinis reikalavimas nėra susijęs su defektu, kuriam taikoma garantija, arba kad garantinis laikotarpis yra pasibaigęs, apžiūros ir remonto išlaidas turi padengti klientas.

Teisinė pastaba: visame turinyje nėra gydomųjų teiginių. Ligų ir kitų fizinių sutrikimų diagnostikai ir gydymui reikalingas gydytojo, ne medicinos specialisto ar terapeuto gydymas. Teiginiai yra griežtai informatyvūs ir negali būti naudojami kaip profesionalaus medicininio gydymo pakaitalas. Kiekvienas vartotojas turi tiksliai ištyri ir, jei reikia, pasikonsultavęs su specialistu, įsitikinti, ar prietaisas yra tinkamas jo konkrečiam atvejui. Dėl kiekvienos dozės ar vartojimo rizikuoja vartotojas. Mes atsiribojame nuo bet kokių gydančių teiginių ar pažadų.

### GAMINIUI SUTEIKIAMA 2 METŲ GARANTIJA.

### ĮSIGIJIMO DATA:

UAB VAIKIS  
KAIMELIO 13, VILNIUS  
info@vaikis.eu | www.vaikis.eu  
+37064083271



Edited with the demo version of  
**Infix Pro PDF Editor**

To remove this notice, visit:  
[www.iceni.com/unlock.htm](http://www.iceni.com/unlock.htm)